



MEDIT

Легкий путь
в цифровую
стоматологию



*i***500**



Medit *iScan*


Превосходная комбинация программного обеспечения и технических возможностей

Сканер i500 с программным обеспечением в комплекте просто освоить и приятно использовать. Сканер доступен всем пользователям и легко интегрируется в клинику или лабораторию.

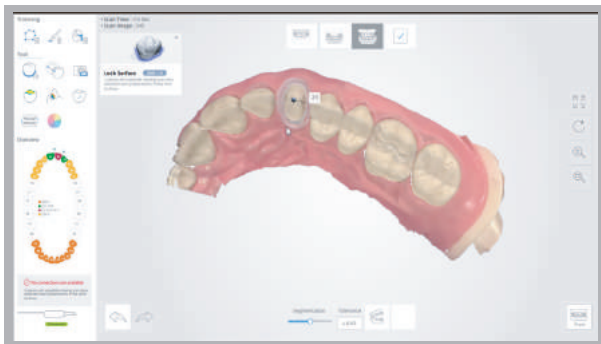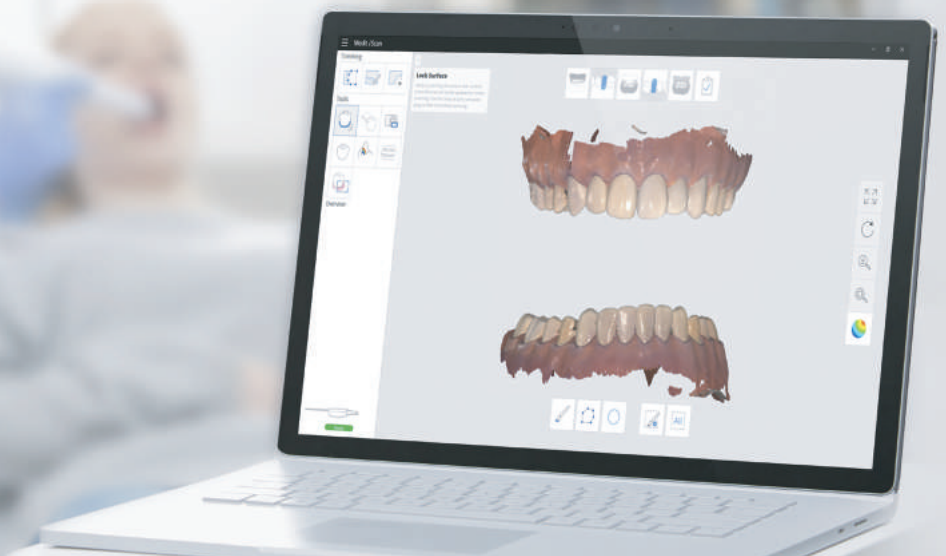

Легкий в использовании ПИ

Пользовательский интерфейс нашего программного обеспечения интуитивный с оптимизированным процессом, поэтому вы тратите меньше времени на сканирование и больше времени на диагностику и лечение пациента.

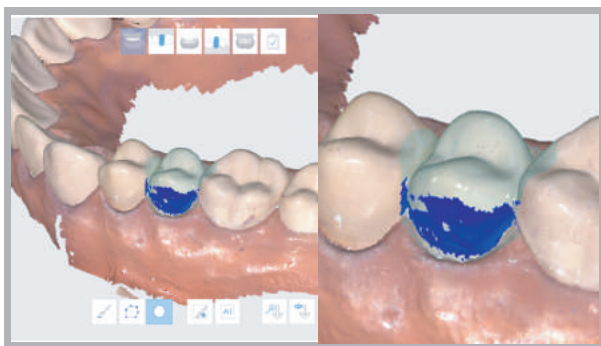

Анализ области поднутрения

Эта особенность позволяет проанализировать области поднутрения на основе направления введения. Вы можете осуществить направление введения двумя методами (автоматически или вручную).



Автоматическое выравнивание

Программное обеспечение iScan автоматически определяет и сканирует прикус.




Анализ прикуса

Функция анализа прикуса оперативно контролирует и отражает точки смыкания верхней и нижней челюсти, показывая результаты на цветовой карте.



Область фиксации

Вы можете зафиксировать исследуемую область и окрасить ее. Окрашенная область не будет обновляться при дальнейшем сканировании. Используйте эту функцию, чтобы отсканировать и зафиксировать десну после ретракции, поскольку она может коллапсировать. Вы по-прежнему можете обрезать зафиксированную область. Удаленную зафиксированную область можно отсканировать повторно.

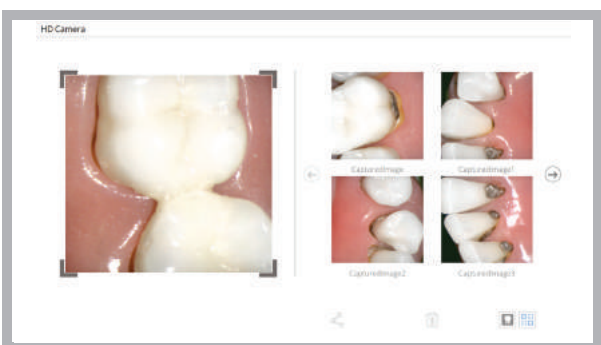

HD камера

Вы можете сделать 2D изображения без 3D модели и отправить их в лабораторию.

ЛЕГКИЙ ПУТЬ В ЦИФРОВУЮ СТОМАТОЛОГИЮ



Спецификация

Категория	Описание
Наконечник	18 x 15.2 мм (WxH)
Общая длина наконечника	266 мм
Вес	276 гр
Технология формирования изображений	3D-видео-в-движении
Цвет	3D полноцветное
Передача данных	USB 3.0
Область захвата при сканировании	14 x 13 мм